

## Sistema Multikuf™ 4 brazales 732


### Kit Multibrazal Portátil

#### Descripción técnica:

- Manómetro estilo palma (gauge #804N) con mecanismo de precisión japonés, alojado en jaula de zinc suspendida dentro de carcasa de polímero ABS, lo que le proporciona resistencia a impactos.
- Válvula de desinflado tipo “trigger-style” (gatillo), ambidiestra, con control infinito, que permite inflado y desinflado con una sola mano — ideal para uso rápido en emergencias.
- Brazaletes Adcuff™ incluidos: Child, Small Adult, Adult y Large Adult — cubriendo una amplia gama de circunferencias para adaptarse a distintos pacientes.
- Brazaletes de dos piezas con vejiga interna; tejido poliéster 600D, con solapa integral que asegura la vejiga y previene abultamientos.
- Sistema de marcado Size Guide™ en los brazaletes, que ayuda a prevenir “mis-cuffing” — uso de talla incorrecta.
- Estuche de transporte resistente de poliéster 600D con cremallera, compartimentos múltiples; dimensiones compactas (~ 8? x 6? x 3.5?) para que quepa en botiquines de emergencia o kits de trauma.
- Conector metálico tipo bayoneta (bayonet-style) para asegurar conexión firme brazaletes-manómetro.
- Libre de caucho natural de látex y ftalatos (“Latex-free / no phthalates”), lo que reduce riesgo de alergias.
- Fabricado, inspeccionado y empacado en EE. UU. a partir de componentes importados.
- Cumple o excede la norma ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para esfigmomanómetros no invasivos, asegurando precisión y validez clínica.



Tamaños disponibles:

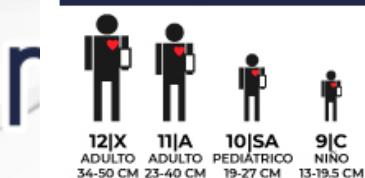

Opciones de color adicionales

**BK**



**Caja de zinc  
contra impactos**



**Válvula  
ambidiestra**

A

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Multibrazal
Manómetro	804N
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	±3 mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión del esfigmomanómetro en rango extendido de temperatura	±3 mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Integral
Número de tubos	1 tubo
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño del brazal	Múltiple
Rango del brazal	13 – 50 cm
Estuche / funda de transporte	8814