

## Sistema Multikuf™ 5 brazales 740

### Kit Multibrazal Portátil

#### Uso previsto:


Sistema portátil de presión arterial diseñado para servicios de emergencia, ambulancias, guardias médicas, clínicas móviles, unidades pre-hospitalarias y entornos clínicos exigentes. Ideal para atención a pacientes de diferentes edades y contexturas (infantil a adulto grande), con un solo equipo versátil que incluye múltiples brazaletes.

#### Descripción técnica:

- Manómetro / Medidor: Gauge serie #804 tipo de palma, con movimiento de precisión de fabricación japonesa, alojado en jaula de zinc suspendida sobre carcasa de polímero para máxima resistencia a golpes y uso intensivo.
- Rango de medición: hasta 300 mmHg
- Válvula de desinflado: tipo trigger (gatillo), ambidiestra e "infinite-control", permite inflado y desinflado con una sola mano, ideal para atención rápida o en ambulancia.
- Brazaletes incluidos (Adcuff™): Child, Small Adult, Adult, Large Adult, Thigh — todos con sistema de marcado Size Guide™ para prevenir "mis-cuffing" (uso de talla incorrecta).
- Construcción de los brazaletes: poliéster 600D, dos piezas (brazalete + cámara interna); mejora durabilidad, fácil limpieza, adecuada para uso repetido.
- Conectores: metálicos tipo bayoneta / luer-slip, permiten selección rápida y segura del brazalete adecuado.
- Estuche / Maletín: nylon 600D con múltiples bolsillos, doble cremallera, asa reforzada (posible montaje en pared cuando está abierto), tamaño compacto para caber en mochilas de emergencia o maletas de trauma.
- Materiales de seguridad: no fabricado con caucho natural de látex, ni ftalatos — seguro para pacientes con alergias.
- Norma / Certificación: cumple o excede la norma internacional ANSI/AAMI/ISO 81060-1 para esfigmomanómetros no invasivos.



Tamaños disponibles:

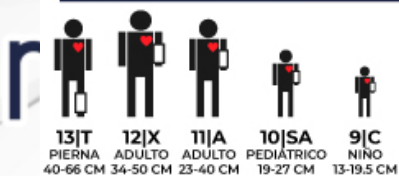

Opciones de color adicionales

BK



Caja de zinc  
contra impactos



Válvula  
ambidiestra

A

Especificación	Detalle
Tipo de esfigmomanómetro	Multibrazal
Manómetro	804N
Garantía	1 año
Precisión del esfigmomanómetro	$\pm 3$ mmHg a 10 °C – 40 °C
Precisión del esfigmomanómetro en rango extendido de temperatura	$\pm 3$ mmHg o 2%, lo que sea mayor, por debajo de 10 °C y por encima de 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C
Tipo de válvula	Integral
Número de tubos	1 tubo
Tipo de brazal	ADCUFF
Tamaño del brazal	Múltiple
Rango del brazal	13 – 66 cm
Estuche / funda de transporte	883